

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. **DA**

GC RELINE™ II Soft
GC RELINE™ II ExtraSoft
 VINYL POLYSILOXAN BLODT REBASERINGSMATERIALE
GC RELINE™ II PRIMER FOR RESIN
 RESIN PRIMER/ADHESIV TIL VINYL POLYSILOXAN BLODT REBASERINGSMATERIALE
GC RELINE™ II FINISHING MATERIAL
 BELÆGNINGS MATERIALE TIL VINYL POLYSILOXAN BLODT REBASERINGSMATERIALE
GC RELINE™ II POINT FOR TRIMMING
 POINTS/PIDS TIL TRIMNING AF BLODT REBASERINGSMATERIALE
GC RELINE™ II WHEEL FOR FINISHING
 HJUL TIL FINISHING AF BLODT REBASERINGSMATERIALE
GC RELINE™ II REMOVER FOR RESIN
 FJERNER TIL BLODT REBASERINGSMATERIALE

Må kun benyttes af fagdygtige teknikere. Til i denne brugsanvisning beskrevne indikationer.

- ANBEFALEDE INDIKATORER**
1. Rebasering af proteser, ved tynde falsonomme slimhinder, samt de tilfælde, hvor kanten er kraftigt resorberet.
 2. Rebasering af proteser, hvor kanten har meget skarpe og bandede kanter.
 3. Rebasering af proteser, hvor kanten har underskæringer (og derfor kan medføre problem ved indstilling/tilbagetrækning af proteser).
 4. Rebasering af implantatunderstøttede proteser.

KONTRAINDIKATORER
 Undgå brug af dette produkt på patienter med kendt allergi overfor silikone.


BRUGSVEJLEDNING:
A) DIREKT REBASERING

1. Kontrollér protesens passform og sensitive områder på slimhinden i fæsket med Fil Checker Advanced eller Fil Checker Advanced Blue)
2. Desinficer med et non-alkohol-baseret produkt og tør protesen grundigt. Afslut området der skal rebaseres med et idet sæt ved mikrobakterier.
3. Rens protesen i ultralydskåbe indeholdende ultralyd eller enzymatisk opløsning og tør protesen grundigt herefter. Påfør GC RELINE II PRIMER FOR RESIN på den del der skal rebaseres med et ultralyd instrument med indstilling/tilbagetrækning af proteser. Rens, tør, olierift luft. Undgå at kontaminere overfladen med latex handsker, pulver fra handsker osv.

1. Sæt lag af fasken umiddelbart efter brug. Undgå at kontaminere primer-fasken med fæst. Dette kan ønske grundlæggende våtskæn.
2. Påfør GC RELINE II Soft eller ExtraSoft direkte på protesen. Arbejdstiden er 2 minutter ved rumtemperatur 23°C (73°F).
3. Indsæt protesen på plads i sin beholder. For patienter der forstår sluta mund. Instruer patienten at lukke sammen i centrisk okklusion og forudgå 6 sekunder. Luk på plads under 15 minutter. Afvågn den derefter.
4. Hold protesen på plads i mindst 5 minutter og tag den ud af munden.
5. Ved brug af skalpel eller saks fjernes overskydende GC RELINE II Soft eller ExtraSoft materiale langs kanten. Brug et let tryk og fjern det overfløede instrument med GC RELINE II POINT FOR TRIMMING. Anvend lav hastighed (mindre end 20.000 omdr./minut). Finish med GC RELINE II WHEEL FOR FINISHING, anvend lav hastighed mindre end 6.000 omdr./minut. Instruer patienten at lukke sammen i centrisk okklusion på en afstand med en fikations hætte eller skive til at holde hjulet sikkert på plads før anvendelse.
6. Hvis det vurderes nødvendigt at opnå en endnu mere glat finish, fjernes overskydende anvendelse. (NB: GC RELINE II FINISHING MATERIAL A og B anses separat)

1. Placer protesen på en gipsmodel. Påfør moderat tryk når dette udføres. Sæt dæren på plads i en artikulator.
2. Placer protesen på gipsmodel efter ca. 30 minutter.
3. Fjern protesen fra modellen efter ca. 30 minutter.
4. Hvis nødvendigt, fjern protesen med punkt 7-8 under "direkte rebasering".

Skematisk oversigt over fremgangsmåden:

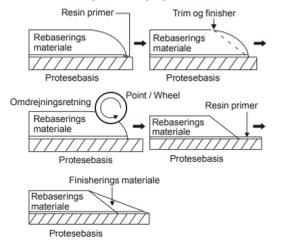

- VEDLIEGELDHOLSEL AF DEN REBASEDE PROTESE**
1. De fleste rengørings- og pleje produkter er beregnet til brug på tand og er blødt berste, brug evt. lidt sæbe.
 2. Brug kun de produkter der er anbefalet af GC RELINE II Soft eller ExtraSoft materialer, kontrolleres profilen og patientens orale væv for eventuelle irriterende. Søfremt det er nødvendigt, aflastes ved rengøring og beskyt med yderligere rebaseringsmateriale og silikonevådningsmiddel. Ifald nødvendigt, anvæt trykkræften og applicer yderligere nyt GC RELINE II Soft eller ExtraSoft på alle yterligere materialer behøvs på beføjet rebasering, gort det med GC RELINE II POINT FOR TRIMMING og Resin primer. Skift til et nyt materiale senest 3 måneder efter det initiale rebaseringsstadiet.
 4. For at bytte ud eksisterende rebaseringsmateriale, følg instruktionen nedenfor:

1. Eksponer underlaget for rebaseringsmateriale på skålen.
2. Fjern eventuelt rebaseringsmateriale med en skalpel.
3. Kom en pap dråber GC RELINE II REMOVER til resin på den eksponerede protease.
4. For en let lappelig håndtømmer eller spatel mellem silikonen og artikuleren, sæt en spatel mellem silikonen og artikuleren og fjern tilbageløst rebaseringsmateriale.

OPBEVARING:
 For optimal ydeevne anbefales det at opbevare materialerne ved rumtemperatur (15-25°C) (59-77°F) og væk fra direkte sollys.

- PAKKINGER**
1. INTRODUKTIONS KIT
 - 1) GC RELINE II CARTRIDGE, Soft 61 g (48 mL) eller ExtraSoft 57 g (48 mL) (1)
 - 2) GC RELINE II PRIMER TIL RESIN 8 g (10 mL) (1)
 - 3) GC RELINE II POINT TIL TRIMMING (1)
 - 4) GC RELINE II WHEEL TIL FINISHING (1)
 - 5) GC RELINE II REMOVER TIL FINISHING 5 g (5,5 mL) (1)
 - 6) MIXING TIP I L (6 pieces)
 - 7) Engangsspindel (3)
 2. REFRIGERERET PAKKING
 - 1) GC RELINE II CARTRIDGE, Soft 61 g (48 mL) eller ExtraSoft 57 g (48 mL) (1)
 - 2) GC RELINE II PRIMER TIL RESIN 8 g (10 mL) (1)
 - 3) GC RELINE II FINISHING MATERIAL A&B 10 g (9 mL) (1 each)
 - 4) GC RELINE II POINT TIL TRIMMING (1)
 - 5) GC RELINE II WHEEL TIL FINISHING (1)
 - 6) GC RELINE II REMOVER (FOR RESIN) 5 g (5,5 mL) (1)
 - 7) Engangsspindel (3)

- ADVARSEL:**
1. I nogle tilfælde kan produktet forårsage overfølsomhedsreaktioner. Hvis symptomer deres forekommer, opfør dem med brug af produktet og søg læge.
 2. Primern og Removeren er flygtige og ættselige. Brug dem ikke i nærheden af lid. Luk flasken straks efter brug og hold dem væk fra antændingskilder.
 3. Tilfælde af kontakt med øjnene, skylles straks med vand og søg læge.
 4. Undgå at få rebaseringsmateriale på tøj. Det er svært at fjerne når det først er afbundet.
 5. Når rebaseringsmateriale appliceres, bør man undgå kontakt med nedanstående materialer, da det kan forsinke afbindingen eller resultere i dårlig adhesion.
 - * Latexhandsker, pulver fra handsker
 - * Kalksilikonmateriale
 - * Polyulfidbaserede aftryksmaterialer
 - * Eugenolholdige materialer
 - * Rebaseringsmaterialer fra andre firmers
 - * Udhærdet akryl
 6. For brug af kontrolruller, at GC RELINE II Point til trimming eller GC RELINE II Wheel til finishering er korrekt anbragt i håndskælet, således at der ikke forekommer en distortion.
 7. Roler med retning fra rebaseringsmateriale og imod protesebasen.
 8. Tryk for hårdt på point eller wheel anvendes.
 9. Når rebaseringsmateriale trimmes eller finisheres anbefales det, at bruge støvmaske for at undgå inhalation af silikonestøv og lignende anbefales det, at bruge beskyttelsesbriller.
 10. Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bæres.

Nogle produkter som beskrevet i IFU kan være klassificeret som farlige i henhold til GHS. Læs altid op på alle arbejdstyghygiene anvisninger som kan findes på <http://www.georgjone.com>

Det kan altid rekreres hvis det depot.

REINHOLD OG DESINFICERING
 Genanvendelsessystemet for afløst krydskontaminering mellem patienter på freds dosser enheder designet til at reducere krydskontaminering mellem patienter. Dette system reducerer risikoen for at overføre bakterier mellem patienter. Dette system består af en desinfektionsmiddel, der anvendes til at rengøre patienter mellem patienter. Dette system består af en desinfektionsmiddel, der anvendes til at rengøre patienter mellem patienter. Dette system består af en desinfektionsmiddel, der anvendes til at rengøre patienter mellem patienter.

Utsigtede bivirkninger:
 Hvis ved brug af produktet oplever nogle ukendte effekter, bivirkninger lgn, som ikke er nævnt i indikationerne, bedes du rapportere dem direkte til Lægemiddelstyrelsen eller via dette link https://europe.eu/health/eu-growth/sectors/medical-devices/contacts_en Samt til vores interne overvågningssystem: vigilance@ge-dental.com Herved hjælper du med til at forbedre sikkerheden omkring produktet.

Sidst revideret: 06/2019

Læs brugsanvisningen noggrant före användning. **SV**

GC RELINE™ II Soft
GC RELINE™ II ExtraSoft
 A-SILIKONBASERAT MUKJUVANDE REBASERINGSMATERIAL
GC RELINE™ II PRIMER FOR RESIN
 PRIMER/ADHESIV FÖR A-SILIKONBASERAT MUKJUVANDE REBASERINGSMATERIAL
GC RELINE™ II FINISHING MATERIAL
 A-SILIKONBASERAD COATING FÖR MUKJUVANDE REBASERINGSMATERIAL
GC RELINE™ II POINT FOR TRIMMING
 SPETS FÖR TRIMNING AV MUKJA REBASERINGSMATERIAL
GC RELINE™ II WHEEL FOR FINISHING
 HJUL FÖR FINISHERING AV MUKJA REBASERINGSMATERIAL
GC RELINE™ II REMOVER FOR RESIN
 REMÖVOR FÖR MUKJA REBASERINGSMATERIAL

Produkten ska endast användas av utbildad tandvårdspersonal samt inom de rekommenderade indikationerna.

- Rekommenderade indikationer**
1. För rebasering av proteser som visar på tunn sensibel mucosa och resorberade benstrukturer.
 2. För rebasering av proteser som visar på vassa benutskott.
 3. För rebasering av proteser som visar på ben med underskär (vilket kan medföra problem vid indstilling/tilbagetrækning af proteser).
 4. För rebasering i samband med implantatstøttede proteser.

KONTRAINDIKATORER
 Undvik att använda denna produkt på patienter med kendt allergi mot silikone.


BRUKSANVISNING:
A) DIREKT REBASERINGSMETOD

1. Kontrollér protesens passform samt sensitive områder på mucosa i fæsket med Fil Checker Advanced eller Fil Checker Advanced Blue)
2. Desinficer med et non-alkohol-primert produkt og tør protesen grundigt. Afslut området der skal rebaseres med et idet sæt ved mikrobakterier.
3. Rengør i ultralydskåb som sika inneholder en enzym våtskælningsmiddel. Tørring derefter noggrant. Applicera GC RELINE II PRIMER FOR RESIN på den del der skal rebaseres med en ren og tør pensel. Tørring med tør olierift luft. Kontaminera inte ytan i dæren med latex handsker, pulver från handsker, etc.

1. Sæt lag af fasken umiddelbart efter brug. Undgå at kontaminere primer-fasken med fæst. Dette kan ønske grundlæggende våtskæn.
2. Påfør GC RELINE II Soft eller ExtraSoft direkte på protesen. Arbejdstiden er 2 minutter ved rumtemperatur 23°C (73°F).
3. Indsæt protesen på plads i sin beholder. For patienter der forstår sluta mund. Instruer patienten at lukke sammen i centrisk okklusion og forudgå 6 sekunder. Luk på plads under 15 minutter. Afvågn den derefter.
4. Hold protesen på plads i mindst 5 minutter og tag den ud af munden.
5. Ved brug af skalpel eller saks fjernes overskydende GC RELINE II Soft eller ExtraSoft materiale langs kanten. Brug et let tryk og fjern det overfløede instrument med GC RELINE II POINT FOR TRIMMING. Anvend lav hastighed (mindre end 20.000 omdr./minut). Finish med GC RELINE II WHEEL FOR FINISHING, anvend lav hastighed mindre end 6.000 omdr./minut. Instruer patienten at lukke sammen i centrisk okklusion på en afstand med en fikations hætte eller skive til at holde hjulet sikkert på plads før anvendelse.
6. Hvis det vurderes nødvendigt at opnå en endnu mere glat finish, fjernes overskydende anvendelse. (NB: GC RELINE II FINISHING MATERIAL A og B anses separat)

1. Placer protesen på en gipsmodel. Påfør moderat tryk når dette udføres. Sæt dæren på plads i en artikulator.
2. Placer protesen på gipsmodel efter ca. 30 minutter.
3. Fjern protesen fra modellen efter ca. 30 minutter.
4. Hvis nødvendigt, fjern protesen med punkt 7-8 under "direkte rebasering".

Skematisk oversigt over fremgangsmåden:

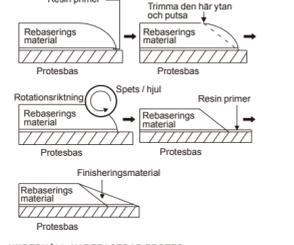

- UNDERHÅLL AV REBASERAD PROTES**
1. Patienten bör rekommenderas att rengöra protesen minst en gång i veckan med ett rengöringsmedel som är speciellt utvecklat för detta ändamål. Om patienten använder sig av ett mjukt mjukt protesebörst används så på mjukbänsningen yta ino skålen.
 2. Senast 3 månader efter att GC RELINE II Soft eller ExtraSoft har applicerats, kallas i patienten för ett återbesök. Detta är för att kontrollera protesen och beräkna de kalkutslag som kan förekomma. Om patienten har en känslig känslig kondition, ifall nödvändigt, anvæt trykkræften och applicer yterligere nyt GC RELINE II Soft eller ExtraSoft på alla yterligere materialer behøvs på beføjet rebasering, gort det med GC RELINE II POINT FOR TRIMMING och Resin primer. Skift til et nyt materiale senest 3 måneder efter det initiale rebaseringsstadiet.
 4. För att byta ut existerande rebaseringsmateriale, följ instruktionen nedan:

1. Eksponer underlaget för rebaseringsmateriale på skålen.
2. Fjern eventuelt rebaseringsmateriale med en skalpel.
3. Kom en pap dråber GC RELINE II REMOVER til resin på den eksponerede protease.
4. For en let lappelig håndtømmer eller spatel mellem silikonen og artikuleren, sæt en spatel mellem silikonen og artikuleren og fjern tilbageløst rebaseringsmateriale.

OPBEVARING:
 For optimal ydeevne anbefales det at opbevare materialerne ved rumtemperatur (15-25°C) (59-77°F) og væk fra direkte sollys.

- FORPÅCKNINGAR**
1. INTRODUKTIONSFORPÅCKNINGAR
 - 1) GC RELINE II CARTRIDGE, Soft 61 g (48 mL) eller ExtraSoft 57 g (48 mL) (1)
 - 2) GC RELINE II PRIMER FOR RESIN 8 g (10 mL) (1)
 - 3) GC RELINE II SPETS FOR TRIMMING (1)
 - 4) GC RELINE II WHEEL FOR FINISHING (1)
 - 5) GC RELINE II REMOVER FOR RESIN 5 g (5,5 mL) (1)
 - 6) MIXING TIP I L (6 pieces)
 - 7) Engångsspindel (3)
 2. REFRIGERERET FORPÅCKNINGAR
 - 1) GC RELINE II CARTRIDGE, Soft 61 g (48 mL) eller ExtraSoft 57 g (48 mL) (1)
 - 2) GC RELINE II PRIMER FOR RESIN 8 g (10 mL) (1)
 - 3) GC RELINE II FINISHING MATERIAL A&B 10 g (9 mL) (1 each)
 - 4) GC RELINE II POINT FOR TRIMMING (1)
 - 5) GC RELINE II WHEEL FOR FINISHING (1)
 - 6) GC RELINE II REMOVER (FOR RESIN) 5 g (5,5 mL) (1)
 - 7) Engångsspindel (3)

- IKTÄGG FÖRSIKTIGHET GÄLLANDE**
1. I sållsynfall kan produktet orsaka sensibilisering. Ifall sådana reaktioner skulle uppkomma, avbryt behandlingen och remittera patienten till läkare.
 2. Primern samt Remover är flyktiga och ättseliga. Använd inte i närheten av ögon. Luk flaskorna straks efter användning och håll dem borta från antändningskällor.
 3. Tillfälle av kontakt med ögonen, skylas straks med vatten och sök läge.
 4. Undgå att få rebaseringsmateriale på tøj. Det er svært at fjerne når det først er afbundet.
 5. Når rebaseringsmateriale appliceres, bør man undgå kontakt med nedanstående materialer, da det kan forsinke afbindingen eller resultere i dårlig adhesion.
 - * Latexhandsker, pulver fra handsker
 - * Kalksilikonmateriale
 - * Polyulfidbaserede aftryksmaterialer
 - * Eugenolholdige materialer
 - * Rebaseringsmaterialer fra andre firmers
 - * Udhærdet akryl
 6. For brug af kontrolruller, at GC RELINE II Point til trimming eller GC RELINE II Wheel til finishering er korrekt anbragt i håndskælet, således at der ikke forekommer en distortion.
 7. Roler med retning fra rebaseringsmateriale og imod protesebasen.
 8. Tryk for hårdt på point eller wheel anvendes.
 9. Når rebaseringsmateriale trimmes eller finisheres anbefales det, at bruge støvmaske for at undgå inhalation af silikonestøv og lignende anbefales det, at bruge beskyttelsesbriller.
 10. Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bæres.

Nogle produkter som beskrevet i IFU kan være klassificeret som farlige i henhold til GHS. Læs altid op på alle arbejdstyghygiene anvisninger som kan findes på <http://www.georgjone.com>

Det kan altid rekreres hvis det depot.

REINHÖLD OG DESINFICERING
 Genanvendelsessystemet for afløst krydskontaminering mellem patienter på freds dosser enheder designet til at reducere krydskontaminering mellem patienter. Dette system reducerer risikoen for at overføre bakterier mellem patienter. Dette system består af en desinfektionsmiddel, der anvendes til at rengøre patienter mellem patienter. Dette system består af en desinfektionsmiddel, der anvendes til at rengøre patienter mellem patienter. Dette system består af en desinfektionsmiddel, der anvendes til at rengøre patienter mellem patienter.

Utsigtede bivirkninger:
 Hvis ved brug af produktet oplever nogle ukendte effekter, bivirkninger lgn, som ikke er nævnt i indikationerne, bedes du rapportere dem direkte til Lægemiddelstyrelsen eller via dette link https://europe.eu/health/eu-growth/sectors/medical-devices/contacts_en Samt til vores interne overvågningssystem: vigilance@ge-dental.com Herved hjælper du med til at forbedre sikkerheden omkring produktet.

Sidst revideret: 06/2019

Antes de utilizar, lea cuidadosamente as instruções de utilização. **PT**

GC RELINE™ II Soft
GC RELINE™ II ExtraSoft
 LINER DE POLISSILOXANO DE NÍVEL PARA REBASAMENTO MOLE
GC RELINE™ II PRIMER FOR RESIN
 PRIMER/ADHESIVO PARA LINER DE POLISSILOXANO DE NÍVEL REBASAMENTO MOLE
GC RELINE™ II FINISHING MATERIAL
 MATERIAL DE COBERTURA PARA LINER DE POLISSILOXANO DE NÍVEL REBASAMENTO MOLE
GC RELINE™ II POINT FOR TRIMMING
 PONTA PARA CORTE DE MATERIAL DE REBASAMENTO MOLE
GC RELINE™ II WHEEL FOR FINISHING
 PUNTA PARA ACABAMENTO DE MATERIAL DE REBASAMENTO MOLE
GC RELINE™ II REMOVER FOR RESIN
 REMOVEDOR DE MATERIAL DE REBASAMENTO MOLE

A ser utilizado apenas por profissionais da área Dentária nas indicações recomendadas.

- INDICAÇÕES RECOMENDADAS**
1. Rebaseramento de próteses em caso de mucosa fina e sensível e resorção das cristas alveolares.
 2. Rebaseramento de próteses em caso de cristas alveolares finas e com pouca mucosa.
 3. Rebaseramento de próteses em caso de perdas ósseas (com dificuldades de inserção ou remoção da prótese).
 4. Rebaseramento de próteses implantossuportadas.

KONTRAINDIKATORER
 Evite utilizar este produto em pacientes com alergias conhecidas a silicões.


INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
A) MÉTODO DE REBASAMENTO DIRETO

1. Verifique os sinais de alerta de contaminação ou contaminação da mucosa (por exemplo com Fil Checker Advanced ou Fil Checker Advanced Blue).
2. Desinficte com um produto de base não alcoólica e seque completamente a prótese.
3. Limpe a área a ser rebasada, idealmente por microabrasão.
4. Aplique a prótese diretamente sobre a mucosa.
5. Aplique o material GC RELINE II Soft ou ExtraSoft diretamente sobre a prótese. O tempo de trabalho é de 2 minutos à temperatura ambiente 23°C (73°F).
6. Coloque a prótese na boca. Pedir ao doente para fechar levemente os dentes e manter a boca fechada por 15 segundos.
7. Remova a prótese da boca após 15 segundos e retire-a com cuidado.
8. Mantenha a prótese em solução durante os próximos 5 minutos e deposite-a em um recipiente adequado.

1. Sæt lag af fasken umiddelbart efter brug. Undgå at kontaminere primer-fasken med fæst. Dette kan ønske grundlæggende våtskæn.
2. Påfør GC RELINE II Soft eller ExtraSoft direkte på protesen. Arbejdstiden er 2 minutter ved rumtemperatur 23°C (73°F).
3. Indsæt protesen på plads i sin beholder. For patienter der forstår sluta mund. Instruer patienten at lukke sammen i centrisk okklusion og forudgå 6 sekunder. Luk på plads under 15 minutter. Afvågn den derefter.
4. Hold protesen på plads i mindst 5 minutter og tag den ud af munden.
5. Ved brug af skalpel eller saks fjernes overskydende GC RELINE II Soft eller ExtraSoft materiale langs kanten. Brug et let tryk og fjern det overfløede instrument med GC RELINE II POINT FOR TRIMMING. Anvend lav hastighed (mindre end 20.000 RPM). Finish med GC RELINE II WHEEL FOR FINISHING, anvend lav hastighed mindre end 6.000 RPM. Instruer patienten at lukke sammen i centrisk okklusion på en afstand med en fikations hætte eller skive til at holde hjulet sikkert på plads før anvendelse.
6. Hvis det vurderes nødvendigt at opnå en endnu mere glat finish, fjernes overskydende anvendelse. (NB: GC RELINE II FINISHING MATERIAL A og B anses separat)

1. Placer protesen på en gipsmodel. Påfør moderat tryk når dette udføres. Sæt dæren på plads i en artikulator.
2. Placer protesen på gipsmodel efter ca. 30 minutter.
3. Fjern protesen fra modellen efter ca. 30 minutter.
4. Hvis nødvendigt, fjern protesen med punkt 7-8 under "direkte rebasering".

Skematisk oversigt over fremgangsmåden:

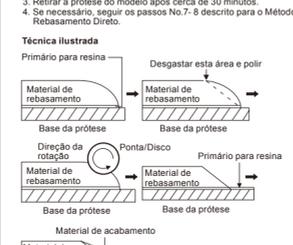

- MANUTENÇÃO DA LINDUPERA REBASADA**
1. Aconselhar o doente a limpar a protese rebasada com água corrente, e utilizar um produto específico para limpeza de próteses.
 2. 3 meses após a aplicação do material GC RELINE II Soft ou ExtraSoft, verificar se existe acumulação de cálcio na prótese e a contaminação da mesma. Se necessário, utilizar um produto específico para limpeza e adicionar GC RELINE II Soft ou ExtraSoft sobre a prótese.
 3. Se for necessário aplicar uma camada adicional a um rebasamento já existente, aplicar a área rebasada original com a ponta de desgaste de GC RELINE II POINT FOR TRIMMING e aplicar o material no prazo de 3 meses desde a aplicação original.
 4. Para substituir o material rebasado existente, seguir o procedimento descrito abaixo:

1. Exponer o substrato para rebaseringsmateriale på skålen.
2. Fjern eventuelt rebaseringsmateriale med en skalpel.
3. Kom en pap dråber GC RELINE II REMOVER til resin på den eksponerede protease.
4. For en let lappelig håndtømmer eller spatel mellem silikonen og artikuleren, sæt en spatel mellem silikonen og artikuleren og fjern tilbageløst rebaseringsmateriale.

OPBEVARING:
 For optimal ydeevne anbefales det at opbevare materialerne ved rumtemperatur (15-25°C) (59-77°F) og væk fra direkte sollys.

- PRESENTAÇÕES**
1. KIT DE INTRODUÇÃO
 - 1) GC RELINE II CARTRIDGE, Soft 61 g (48 mL) ou ExtraSoft 57 g (48 mL) (1)
 - 2) GC RELINE II PRIMER FOR RESIN 8 g (10 mL) (1)
 - 3) GC RELINE II POINT FOR TRIMMING (1)
 - 4) GC RELINE II WHEEL FOR FINISHING (1)
 - 5) GC RELINE II REMOVER FOR RESIN 5 g (5,5 mL) (1)
 - 6) MIXING TIP I L (6 unidades)
 - 7) Pinçol descartável (3)
 2. KIT DE REFIN
 - 1) GC RELINE II CARTRIDGE, Soft 61 g (48 mL) ou ExtraSoft 57 g (48 mL) (1)
 - 2) GC RELINE II PRIMER FOR RESIN 8 g (10 mL) (1)
 - 3) GC RELINE II FINISHING MATERIAL A&B 10 g (9 mL) (1 each)
 - 4) GC RELINE II POINT FOR TRIMMING (3)
 - 5) GC RELINE II WHEEL FOR FINISHING (1)
 - 6) GC RELINE II REMOVER (FOR RESIN) 5 g (5,5 mL) (1)
 - 7) Pinçol descartável (3)

- PRECAUÇÕES**
1. Em raras ocasiões, o produto pode causar sensibilização em algumas pessoas. Se ocorrer alguma reação do gênero, descontinuar o uso deste produto e procurar um médico.
 2. O primário e o removedor são voláteis e inflamáveis. Não utilizar próximo do fogo. Fechar o frasco imediatamente depois de utilizar e manter afastado de fontes de ignição.
 3. Em caso de contato com os olhos, enxaguar imediatamente com água e procurar cuidados médicos.
 4. Evitar contato do material de rebasamento com a roupa. É difícil removê-lo uma vez que endurece e penetra no tecido.
 5. Quando aplicar o material de rebasamento, deve-se ter cuidado para evitar respingos em contato com os seguintes materiais, pois estes podem dificultar o tempo de presa ou causar uma pobre aderência:
 - * Latex ou látex, pó de látex
 - * Material de impressão tipo silicone de Condensação
 - * Material de impressão tipo Polissiloxano
 - * Materiais a base de Eugenol
 - * Material de rebasamento de outras marcas.
 6. Antes da aplicação, verificar se o eixo do disco GC RELINE II WHEEL FOR TRIMMING ou do disco GC RELINE II WHEEL FOR FINISHING giram corretamente sem distúrbios.
 7. Girar a broca ou o disco a partir do material de rebasamento em direção à base da dentadura.
 8. Não utilizar pressão excessiva quando da utilização da broca ou do disco de proteção.
 9. Não cortar ou dar acabamento no material de rebasamento, utilizar uma máscara para evitar a inalação do pó do silicone, bem como o óculos de proteção devem ser sempre utilizados.

Alguns produtos referenciados na presente Instrução de utilização podem não estar disponíveis em todos os países. Para mais informações, consulte o site www.georgjone.com. Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO
SISTEMAS MULTISUSO: para evitar a contaminação cruzada entre pacientes, é importante seguir as seguintes etapas de limpeza imediatamente após o uso inspecionar o material e o rótulo para garantir que o produto esteja limpo e pronto para o próximo uso. Descartar se estiver danificado.

NON MERGULARIUM: Limpar completamente o sistema para prevenir a acumulação de contaminantes. Desinficte com um produto registrado de nível médio de controle de infecção de acordo com as diretrizes regionais / nacionais.

Relatório de efeitos indesejados:
 Se você encontrar ocorrência de qualquer tipo de efeito indesejado, por favor, notifique imediatamente os representantes locais de vendas ou o representante de vendas mais próximo de você. Você também pode notificar diretamente o representante de vendas mais próximo de você. Você também pode notificar diretamente o representante de vendas mais próximo de você. Você também pode notificar diretamente o representante de vendas mais próximo de você.

Última revisão: 06/2019

Πριν από τη χρήση παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. **EL**

GC RELINE™ II Soft
GC RELINE™ II ExtraSoft
 ΜΑΛΑΚΟ ΕΠΙΤΡΩΜΑ ΒΙΝΥΛΠΟΛΥΣΙΛΟΞΑΝΩΣ
GC RELINE™ II PRIMER FOR RESIN
 ΠΡΩΤΟΒΑΖΗ ΕΜΦΥΤΩΣΗΣ ΣΥΝΤΡΟΧΗΛΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΟ ΕΠΙΤΡΩΜΑ ΒΙΝΥΛΠΟΛΥΣΙΛΟΞΑΝΩΣ
GC RELINE™ II FINISHING MATERIAL
 ΥΠΟΚΑΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΟΥ ΕΠΙΤΡΩΜΑΤΟΣ ΒΙΝΥΛΠΟΛΥΣΙΛΟΞΑΝΩΣ
GC RELINE™ II POINT FOR TRIMMING
 ΕΓΓΥΘΑΔΑ ΤΡΟΧΙΣΜΟΥ ΜΑΛΑΚΟΥ ΕΠΙΤΡΩΜΑΤΟΣ
GC RELINE™ II WHEEL FOR FINISHING
 ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΑΛΑΚΟΥ ΕΠΙΤΡΩΜΑΤΟΣ
GC RELINE™ II REMOVER FOR RESIN
 ΥΓΚΑΙΟ ΑΝΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΑΛΑΚΟΥ ΕΠΙΤΡΩΜΑΤΟΣ

Διατίθεται προς χρήση από οδοντίατρο και να τις προτεινόμενες ενδείξεις αναφορικά στις ενδείξεις.

- ΠΡΟΤΙΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**
1. Αναγωγή οδοντοστομίας σε περιπτώσεις καλύτερης λειτουργίας οδοντοστομίας και απορροφητικής ακρότητας.
 2. Αναγωγή οδοντοστομίας σε περιπτώσεις οξείων και σταθερών ακρότητας.
 3. Αναγωγή οδοντοστομίας σε περιπτώσεις οξείων υποστηρίξεων.
 4. Αναγωγή οδοντοστομίας σε περιπτώσεις οξείων υποστηρίξεων.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
 Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος αυτού σε ασθενείς με γνωστή αλλεργία στην σιλίκωνη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Α) ΔΙΕΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΜΩΣΗΣ